

airtex^{PRO}

¡¡NUEVO!!

airtex^{PRO}




La gama PRO
para recuperación
articular

airtex^{PRO}

TEJIDO TRICAPA
ligereza adaptable

flex
eco
sense

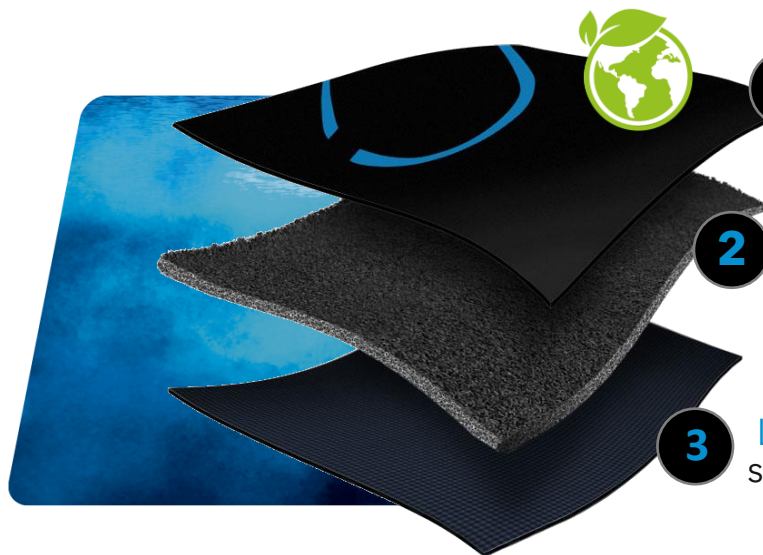

1

Licra **compresiva** desarrollada con fibras de nylon 100% regenerado.

2

Espuma **ligera** con gran capacidad de compresión y adaptación.

3

Licra **compresiva** de tacto suave en contacto con la piel.

Favorece la **circulación sanguínea**



Favorece la **descarga** de la **articulación**



Favorece el **movimiento natural**



airtex^{PRO}

**100%
transpiración activa**



Tejidos diseñados para favorecer
la eliminación activa del calor y del sudor.
*Ayudan a mantener la piel sana y
a sentirse fresco y confortable.*

**SIEMPRE A LA VANGUARDIA
para una experiencia de uso única**

Patronajes depurados y tejidos de alta calidad,
efectos supermate&reflectante, etc.
*Un conjunto que aporta dinamismo
a las prendas para el consumidor de hoy.*



Detalles técnicos: componentes funcionales



Rodete rotuliano



Cinchas con y sin elasticidad



Cierres microvelcro




Apertura superior



Tejido malla

Detalles técnicos: componentes rígidos

Flejes flexibles

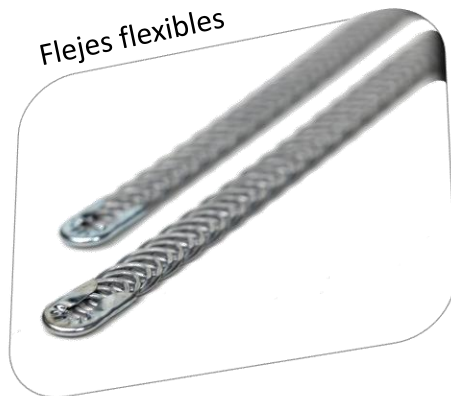

Articulación policéntrica "forte"




Articulación ROM "easy"



Férula pronación

Estabilizador

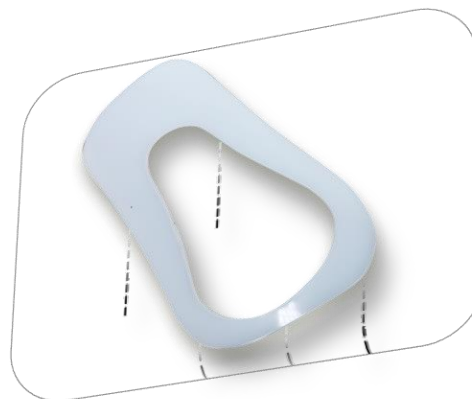

airtex^{PRO}

Un **sistema revolucionario**: 1 ortesis, 4 aplicaciones

**Sistema de
ajuste versátil*:**

combinación de diferentes
elementos que permiten
colocar de forma selectiva
las cinchas de sujeción
para la personalización del
tratamiento estabilizador
en función de la lesión.



* sistema integrado
en las referencias
ATX721 y ATX730



Lesiones **LCA**

airtex^{PRO}

¿Cómo actúa el
sistema de ajuste versátil?
tracción **femoral** hacia adelante
& tracción **tibial** hacia atrás



desplazamiento
tibial



Lesiones **LCP**


airtex^{PRO}

¿Cómo actúa el
sistema de ajuste versátil?

tracción **femoral hacia atrás**
& tracción **tibial hacia adelante**



desplazamiento
tibial

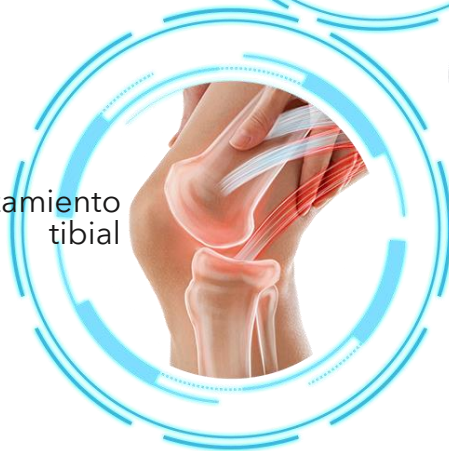

lesión




Otras lesiones

airtex^{PRO}

Leves lesiones de hiperextensión
tracción **femoral y tibial hacia atrás**



Leves flexiones patológicas
tracción **femoral y tibial hacia adelante**

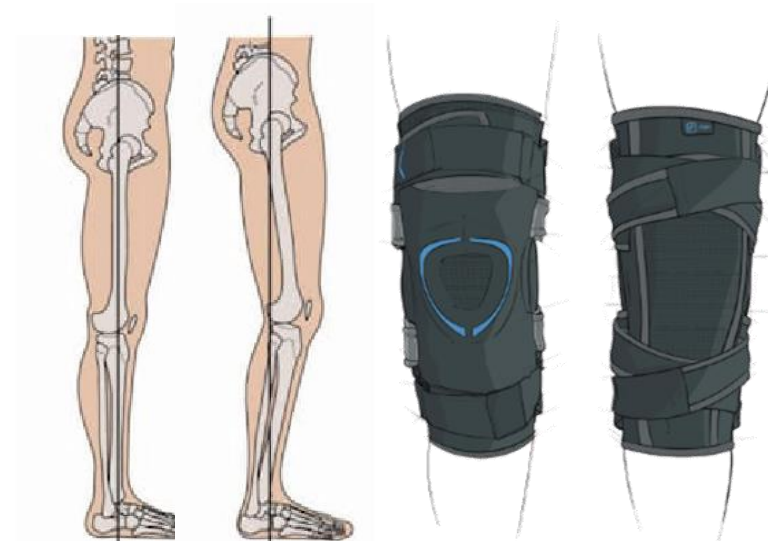

*siéntete viv@
100% activ@*

airtex^{PRO}

efectos

- Ofrece estabilidad a la articulación de forma dinámica, ayudando a mejorar el tratamiento y a una recuperación rápida y segura.
- Máxima adaptabilidad, transpirabilidad, ligereza y comodidad para la articulación.

100%
MADE IN
SPAIN
PREMIUM QUALITY

airtex^{PRO}

Fichas técnicas producto



airtex^{PRO}

atx710
Rodillera
con flejes y cinchas



atx710 **Rodillera** con flejes y cinchas

- 4 estabilizadores flexibles.
- Rodete rotuliano anatómico.
- Tejido **mall**a en rótula y hueco poplíteo.
- Doble sistema de **ajuste** contralateral.
- Costuras **lateralizadas** en hueco poplíteo.
- Ribeteado y costuras **elásticas**.
- Soporte de **ayuda** a la colocación.

flex
eco
sense

5 tallas: S | M | L | XL | XXL - Bilateral

airtex^{PRO}




airtex^{PRO}

atx710
Rodillera
con flejes y cinchas

Indicaciones

Tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, subluxación rotuliana, condromalacia rotuliana, distensiones y esguinces, subluxación patelar.

Talla	Perímetro de rodilla (cm)
S	32-35
M	35-38
L	38-41
XL	41-45
XXL	45-50

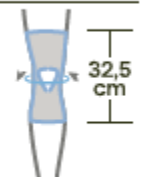

UNISEX | Bilateral

airtex^{PRO}

atx720
**Rodillera
envolvente**
con articulación policéntrica





atx720
**Rodillera
envolvente**
con articulación policéntrica

-  2 articulaciones policéntricas.
-  Rodete rotuliano anatómico.
-  Tejido **mall**a en rótula.
-  Cierre **envolvente** doble banda.
-  Sistema **antideslizante** antialérgico.
-  Ribeteado y costuras **elásticas**.

flex
eco
sense

3 tallas: S | M | L - Bilateral

airtex^{PRO}



airtex^{PRO}

atx720

Rodillera envolvente


con articulación policéntrica

Indicaciones

Tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis y osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia, subluxación rotuliana, inestabilidad de ligamento colateral o patelofemoral. Control de varo y valgo. Post traumatismos y postcirugía.

Talla Perímetro de rodilla (cm)

S 32-36
M 36-41
L 41-49

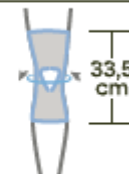

UNISEX | Bilateral

airtex^{PRO}

atx721
Rodillera
con articulación policéntrica





atx721 **Rodillera** con articulación policéntrica

- 2 articulaciones policéntricas.
- Rodete rotuliano anatómico.
- Tejido **mall**a en rótula y hueco poplíteo.
- Apertura superior.
- Sistema de **ajuste versátil**.
- Costuras **lateralizadas** en hueco poplíteo.
- Ribeteado y costuras **elásticas**.
- Soporte de **ayuda** a la colocación.

flex
eco
sense

5 tallas: S | M | L | XL | XXL - Bilateral

airtex^{PRO}



airtex^{PRO}


atx721

Rodillera


con articulación policéntrica

Indicaciones

Tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis y osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia, subluxación rotuliana, post traumatismos y postcirugía. Control de varo y valgo. Inestabilidad de ligamento colateral o patelofemoral, lesiones de LCA, LCP, lesiones meniscales, de ligamentos laterales y mixtas.

Talla Perímetro de rodilla (cm)

S	32-35
M	35-38
L	38-41
XL	41-45
XXL	45-50

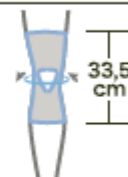

UNISEX | Bilateral



airtex^{PRO}

atx730
Rodillera
con articulación ROM



atx730 Rodillera con articulación ROM

- 2 articulaciones policéntricas ROM.
- Rodete rotuliano anatómico.
- Tejido malla en rótula y hueco poplíteo.
- Apertura superior.
- Sistema de ajuste versátil.
- Costuras lateralizadas en hueco poplíteo.
- Ribeteado y costuras elásticas.
- Soporte de ayuda a la colocación.

flex
eco
sense

5 tallas: S | M | L | XL | XXL - Bilateral

airtex^{PRO}

Flexión:
0°, 30°,
55°, 75°,
95°, 110°

Extensión:
15° o 75°.




airtex^{PRO}

atx730 Rodillera con articulación ROM

Indicaciones

Control de la movilidad de la rodilla. Tratamiento postquirúrgico de la rodilla, inestabilidad de rodilla anteroposterior y medio lateral, lesión de ligamento cruzado anterior (LCA) y lesión de ligamento cruzado posterior (LCP). Rehabilitación después de lesiones y postcirugías.

Talla	Perímetro de rodilla (cm)
S	32-35
M	35-38
L	38-41
XL	41-45
XXL	45-50

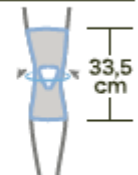

UNISEX | Bilateral



airtex^{PRO}

atx820
Tobillera
con estabilizadores y vendaje "8"



atx820 Tobillera con estabilizadores y vendaje "8"

- 2 estabilizadores ergonómicos.
- Banda elástica para vendaje en "8".
- Apertura frontal completa.
- 3 cierres tibiales y 1 en empeine.
- Compresión regulada.
- Talón libre.
- Ribeteado y costuras elásticas.

EVOLUTIVA.



flex
eco
sense

4 tallas: S | M | L | XL - Bilateral

airtex^{PRO}


airtex^{PRO}

atx820
Tobillera
con estabilizadores y
vendaje "8"

Indicaciones

Tratamiento de esguince de tobillo leve y moderado, tendinitis de tobillo, traumatismo, contusión, derrame articular, irritación crónica, postoperatoria, artrosis, artritis de tobillo e inestabilidad.

Talla	Perímetro del tobillo (cm)
S	20-22
M	22-24
L	24-26
XL	26-28

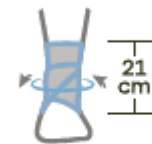

UNISEX | Bilateral





atx830
Tobillera
con férula y cinchas

- 1 férula anatómica en pronación.
- Banda antivaro unida a la férula.
- Cincha trasera inelástica.
- Apertura frontal completa.
- 2 cierres tibiales y 1 en empeine.
- Talón libre.
- Ribeteado y costuras elásticas.



flex
eco
sense

3 tallas: S | M | L - Guarda lado

airtex^{PRO}

airtex^{PRO}




atx⁸³⁰
Tobilлера
con férula y cinchas

Indicaciones

Rehabilitación
postoperatoria tras
inmovilización,
posicionamiento
postraumático,
esguinces de 2°.

Talla	Perímetro del tobillo (cm)
S	17-20
M	20-25
L	25-30

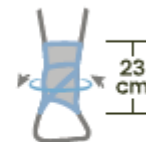

UNISEX | Guarda Lado | Decha. / Izda.

airtex^{PRO}

Posicionamiento

Posicionamiento rodilleras

atx710
Rodillera
con flejes y cinchas



Patologías inespecíficas, esguinces leves o inestabilidades de rodilla. Prevención.

atx720
Rodillera envolvente
con articulación policéntrica



Control varo y valgo de rodilla, ligera artrosis, esguince 2°. Postoperatorio. Ideal para procesos inflamatorios y/o anatomías descompensadas.

atx721
Rodillera
con articulación policéntrica



Control varo y valgo de rodilla, leve recurvatum, leve flexum, lesiones LCA, LCP, meniscales, de ligamentos laterales y mixtas.

atx730
Rodillera
con articulación ROM



Control de los movimientos de la articulación en lesiones postoperatorias y crónicas.

Posicionamiento tobilleras

atx820
Tobillera
con estabilizadores y vendaje "8"



Esguinces 1° y 2°, inestabilidad medio lateral de tobillo, práctica deportiva. Prevención.

atx830
Tobillera
con férula y cinchas



Esguinces laterales de tobillo 2°, inestabilidades crónicas. Ideal posicionamiento en pronación.



Nuestro packaging



airtex^{PRO}

Materiales
de trabajo

Folleto presentación

airtex^{PRO}

siéntete vivo@
100% activo@



NUEVO

airtex^{PRO}

La gama PRO para recuperación articular

De PROFESIONAL a PROFESIONAL

Nuestro trabajo es que tú puedas hacer el tuyo de la forma más eficaz y precisa. De este objetivo nace AIRTEX PRO, nuestra línea renovada de ortesis más técnica y profesionalizada.



03

UNA ORTESIS. CUATRO APLICACIONES



Este sistema único también permite personalizar la ortesis en casos de leves lesiones de hiperextensión o leves flexiones patológicas.



Sistema integrado en las referencias ATK721 y ATK791.



airtex^{PRO}

atx710
Rodillera
con flejes y cinchas

4 estabilizadores flexibles guían y proporcionan soporte medio-lateral a la articulación sin limitar la flexo-extensión.

Rodete rotuliano anatómico que ayuda a la estabilidad y a la alineación de la rótula durante el movimiento.

Doble sistema de ajuste contralateral como refuerzo del control y posicionamiento de la articulación.

Tejido malla para la protección de la rótula y del hueso popliteo: evita el efecto ventosa y favorece la dinámica de la marcha.

Indicaciones: tratamiento del dolor articular, bursitis, tendinitis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, subluxación rotuliana, condromalacia rotuliana, distensiones y esguinces, subluxación patelar, posttraumatismos y postquirúrgica.



100% LATEX FREE ✓



Versión impresa y versión digital

Vídeos colocación

airtex^{PRO}

MODO DE COLOCACIÓN

Rodillera
con articulación ROM



airtex^{PRO}

MODO DE COLOCACIÓN

Tobillera
con férula y cinchas



airtex^{PRO}

Principales
competidores



7103
Rodillera con
refuerzos laterales
flexibles



7120
Rodillera envolvente
con articulaciones
policéntricas



7104
Rodillera con
articulaciones
policéntricas



7104-A
Rodillera abierta
con articulaciones
policéntricas



7112
Rodillera
flexo-extensión
corta



7113
Rodillera
flexo-extensión
larga
abierta



EST-084
Estabilizador de
tobillo transpirable
con placas
termoplásticas



EST-091
Tobillera con férula
estabilizadora
medio-lateral
ALTTEX



RD564
Ortesis
estabilizadora de
rodilla



RD561
Ortesis estabilizadora
de rodilla con
articulación
policéntrica



RD561
Ortesis de rodilla
para ligamentos
cruzados



RD570
Ortesis estabilizadora
de rodilla con
articulación
graduable



RD575
Ortesis estabilizadora
de rodilla con
articulación
graduable
abierta

Ottec



TB501
Ortesis de tobillo ajustable



TB510
Ortesis estabilizadora de tobillo

airtex^{PRO}

TEJIDO TRICAPA
ligereza adaptable

100%
transpiración activa



-espesor, +ligero, +compresión, +adaptable

Ventajas

-  Nueva gama, con un tejido exclusivo de elevada compresión y ligereza. Con un gran poder de recuperación y con detalles de confección diferenciales.
-  Revolucionario sistema de ajuste versátil: 1 órtesis = 4 aplicaciones.
-  Gama completa con pocas referencias.



La gama PRO para recuperación articular

De PROfesional a PROfesional



airtex^{PRO}

GRACIAS